



Transformando tecnologia em saúde

RUGAI MODIFICADO RENYLAB

IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA DE ENTEROBACTÉRIAS



Transformando tecnologia em saúde

Rodovia BR 040 - Km 697 - Caiçaras
36.205-666 - Barbacena - MG
(55) 32 3331-4489 • (55) 32 3333-0379

www.renylab.ind.br
comercial@renylab.ind.br

[f/renylab](https://www.facebook.com/renylab)

Laboratórios e clínicas estão buscando melhores alternativas para visualizar reações bacterianas e obter maior eficácia e melhor índice de acertos em suas análises. O meio Rugai RenyLab se diferencia pelo seu alto grau de nitidez na identificação das provas, o que lhe confere melhor performance e segurança para a interpretação dos resultados. Possui rolha de algodão confeccionada especialmente para a realização da prova de Indol e também impedir o ressecamento precoce do meio.

Além da praticidade para inoculação, na triagem de enterobactérias, disponibiliza NOVE provas em um único tubo de ensaio com substratos para: Lisina, Glicose, Uréia, H₂S, Sacarose, Fenilalanina, Indol, Motilidade e Gás de Glicose.



Ligue para uma de nossas consultoras e faça parte do universo da qualidade e precisão em seus resultados microbiológicos.

ENTREGA EM TODO O BRASIL


RUGAI MODIFICADO RENYLAB

IDENTIFICAÇÃO PRESUNTIVA DE ENTEROBACTÉRIAS

COLÔNIAS LACTOSE (-) E OXIDASE (-)

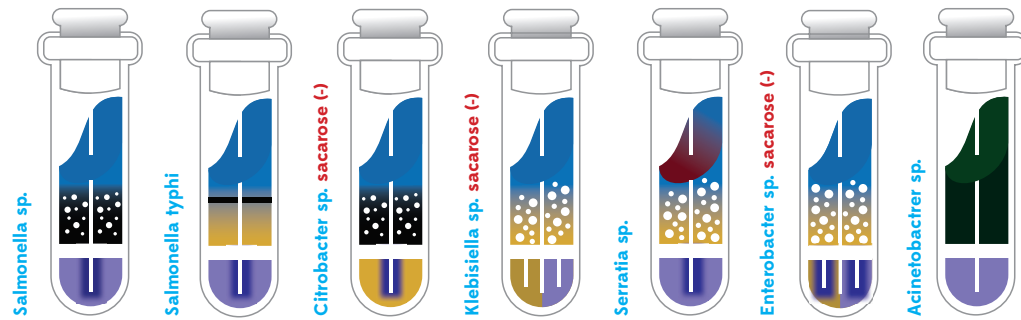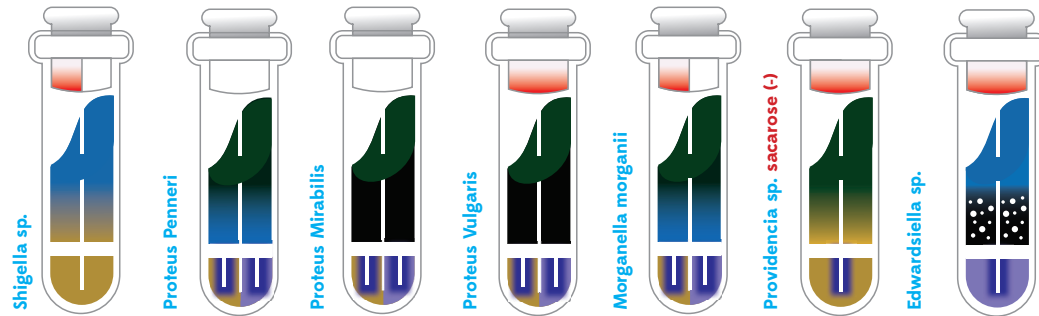

COLÔNIAS LACTOSE (+) E OXIDASE (-)

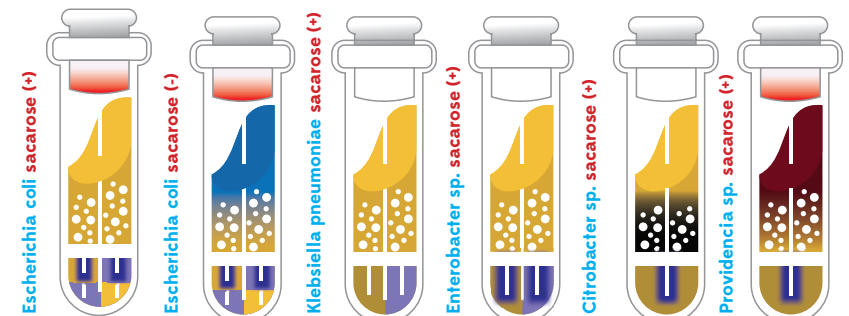

COLÔNIAS LACTOSE (-) E OXIDASE (+)



Bactérias do gênero *Proteus* e *Morganella* são Lisina negativa, mas podem apresentar resultados positivos no Meio Rugai com Lisina devido a hidrólise da Uréia

Legenda

