

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA030	Título: Certificado de Análise do Produto Acabado – Kit GRAM		
Pág: 1/2			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade
Certificado de análise do Kit GRAM

Data de Fabricação: 29/11/2017	Lote: 1711707
Data de Validade: 27/11/2019	Embalagem: Caixa contendo 4 frascos de 500mL

Corante Fucsina Diluída – Lote: 1711698 Fab.: 27/11/2017 Val.: 27/11/2019

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução rosa escuro	DA
Densidade	0,980 a 1,100 g/cm ³	1,003 g/cm³
pH	4,0 a 7,0	5,24

Corante Violeta Genciana – Lote: 1711699 Fab.: 27/11/2017 Val.: 27/11/2019

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução violeta escuro	DA
Densidade	0,950 a 1,050 g/cm ³	0,996 g/cm³
pH	2,5 a 6,0	5,87


Corante Lugol para GRAM – Lote: 1711701 Fab.: 28/11/2017 Val.: 28/11/2019

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Solução marrom avermelhada	DA
Densidade	0,950 a 1,100g/cm ³	1,017 g/cm³
pH	3,0 a 5,0	4,41

Descorante para GRAM – Lote: 1711700 Fab.: 28/11/2017 Val.: 28/11/2019

Análise Físico-Química		
Ensaio	Especificação	Resultado
Descrição	Líquido transparente	DA
Densidade	0,750 a 0,950 g/cm ³	0,809 g/cm³
pH	5,0 a 7,0	6,92

- D.A = de acordo

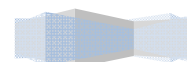

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAPA030	Título: Certificado de Análise do Produto Acabado – Kit GRAM		
Pág: 2/2			
Revisão: 04	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Análise Funcional (conjunto 1, 2, 3 e 4)		
Ensaio	Especificação	Resultado
Coloração – bactérias Gram positivas	De acordo com os corantes coram-se de roxo escuro	D.A
Coloração – bactérias Gram negativas	De acordo com os corantes coram-se de vermelho (fucsina)	D.A

Bibliografia
POPCQ-036; POPCQ045; POPCQ063; Otto Bier: Bacteriologia e imunologia; Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica, Lynch: Técnicas de Laboratório.

Parecer
<i>A amostra analisada atende as especificações descritas.</i>

Data: 30/11/2017

Analista Responsável  Ana Cláudia Castilho Auxiliar de Laboratório Ana Cláudia Castilho	Gerente Controle de Qualidade  Daniela de Sales Guillarducci
--	---

