

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB070	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromôgenico Strepto B		
Pág.: 1/1			
Revisão: 00	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 15/10/2018	Antônio		Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Cromogênico Strepto B
Finalidade: Meio Cromogênico utilizado para isolamento e diferenciação de <i>Streptococcus</i> do Grupo B

Data de fabricação: 18/07/2019	Lote: 19070912
Data de validade: 18/10/2019	Apresentação: Placa de Petri 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 18/07/2019
Numero MS: 80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Cor opaca e homogênea.	Cor opaca e homogênea.
pH a 25 C	7,2 ± 0,2	6,99
Volume	23 mL	23 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	Crescimento bom a excelente, colônias roxas magenta.	Crescimento bom a excelente, colônias roxas magenta
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Crescimento parcialmente inibido, colônias pequenas rosas claras.	Crescimento parcialmente inibido, colônias pequenas rosas claras
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Crescimento bom a excelente, colônias azuis.	Crescimento bom a excelente, colônias azuis.
<i>Candida albicans</i> ATCC 60193	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações acima descritas

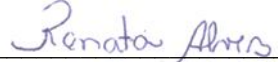
Data: 22/07/2019

Analista

Analista

Coordenador Técnico


Joelma de Souza Oliveira


Renata Alves dos Santos


Antônio dos Santos Galli