

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB006	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Citrato de Simmons		
Pág: 1/2			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle de Qualidade

Certificado de análise Agar Citrato de Simmons	
Finalidade: Verifica a capacidade da bactéria de utilizar o Citrato de sódio como única fonte de carbono, juntamente com sais de amônia, alcalinizando o meio.	

Data de fabricação: 16/09/2019	Lote: 19091183
Data de validade: 16/03/2020	Apresentação: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 16/09/2019
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Cor verde e homogênea.	Cor Verde e homogênea.
pH a 25°C	7,0 ± 0,2	7,13
Volume	3 mL	3 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Meio inalterado	Meio inalterado
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC13883	Desenvolvimento da cor azul	Desenvolvimento da cor azul

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação.

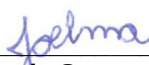
Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág 24.

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i>

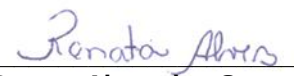
Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 17/09/2019

Analista


Joelma de Souza Oliveira

Analista


Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


Antônio dos Santos Galli

	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB006	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Citrato de Simmons		
Pág: 2/2			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 22/12/2014	Renata	Mônica	Renata