

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB030	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Trial MacConkey/Sangue /Chocolate		
Pág: 1/2			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 10/10/2014	Renata	Mônica	Renata

Controle da Qualidade

Certificado de análise – Agar Trial MacConkey/Sangue /Chocolate

Data de fabricação: 28/07/2020	Lote: 20070784
Data de validade: 28/11/2020	Apresentação: Placa de Petri Trial 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 29/07/2020
Numero MS: 80002670074	Armazenagem: 2º a 8°C

Análise Físico Química Agar Chocolate		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Meio de cor marrom e homogêneo	Meio de cor marrom e homogêneo
pH a 25° C	7,3 ± 0,2	7,40
Volume	8 mL	8 mL

Análise Físico química Agar Sangue		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Vermelho	Vermelho
pH a 25°C	7,3 ± 0,2	7,44
Volume	8 mL	8 mL

Análise Físico química Agar MacConkey		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Rosa escuro a roxo	Rosa escuro a roxo
pH a 25 C	7,1 ± 0,2	7,10
Volume	8 mL	8 mL

Análise de Desempenho Agar MacConkey		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 12453	Crescimento de colônias incolores	Crescimento de colônias incolores
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Crescimento de colônias cor-de-rosa	Crescimento de colônias cor-de-rosa
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Inibição do crescimento	Inibição do crescimento

Análise de Desempenho Agar Sangue		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)	Beta hemólise: Presença de halo transparente ao redor das colônias (Lise total)
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC6305	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)	Alfa hemólise: Presença de halo esverdeado ao redor das colônias (Lise parcial)
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias.	Gama hemólise: Ausência de halo ao redor das colônias

Análise de Desempenho		
-----------------------	--	--

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAMB030	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Trial MacConkey/Sangue /Chocolate		
Pág: 2/2			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 10/10/2014	Renata	Mônica	Renata

Ágar Chocolate		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 10211	Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro. Crescimento bom a excelente	Colônias pequenas e delicadas com pigmento creme claro. Crescimento bom a excelente

Análise da Esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

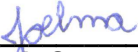
Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i>

Obs: A data de expiração aplica-se ao produto na sua embalagem intacta, quando armazenado em condições adequadas. Os meios não devem ser usados se houver algum sinal da deterioração, contaminação ou se a data de validade expirar.

Data: 31/07/2020.

Analista


 Joelma de Souza Oliveira

Analista


 Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


 Antônio dos Santos Galli