

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB070	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Strepto B		
Pág.: 1/1			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Antônio	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Cromogênico Strepto B
Finalidade: Meio Cromogênico utilizado para isolamento e diferenciação de <i>Streptococcus</i> do Grupo B

Data de fabricação: 21/01/2021	Lote: 21010103
Data de validade: 21/04/2021	Apresentação: Placa de Petri 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 21/01/2021
Numero MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Cor opaca e homogênea.	Cor opaca e homogênea.
pH a 25 C	7,2 ± 0,2	7,23
Volume	23 mL	23 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 6305	Crescimento bom a excelente, colônias roxas magenta.	Crescimento bom a excelente, colônias roxas magenta
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	Crescimento parcialmente inibido, colônias pequenas rosas claras.	Crescimento parcialmente inibido, colônias pequenas rosas claras
<i>Enterococcus faecalis</i> ATCC 29212	Crescimento bom a excelente, colônias azuis.	Crescimento bom a excelente, colônias azuis.
<i>Candida albicans</i> ATCC 60193	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 7853	Crescimento Inibido	Crescimento Inibido

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações acima descritas


Data: 25/01/2021

Analista



Joelma de Souza Oliveira

Analista

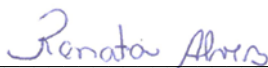

Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli