

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB006	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Citrato de Simmons		
Pág: 1/1			
Revisão: 02	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Renata	Antônio	Renata Alves

Controle de Qualidade

Certificado de análise Agar Citrato de Simmons
Finalidade: Verifica a capacidade da bactéria de utilizar o Citrato de sódio como única fonte de carbono, juntamente com sais de amônia, alcalinizando o meio.

Data de fabricação: 13/04/2021	Lote: 21040490
Data de validade: 13/10/2021	Apresentação: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 13/04/2021
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2º a 8ºC

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Cor verde e homogênea.	Cor Verde e homogênea.
pH a 25°C	7,0 ± 0,2	7,06
Volume	3 mL	3 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Meio inalterado	Meio inalterado
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC13883	Desenvolvimento da cor azul	Desenvolvimento da cor azul


Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica.

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág 24.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas


Data: 14/04/2021.

Analista

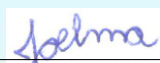

Joelma de Souza Oliveira

Analista

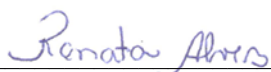

Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico



Antônio dos Santos Galli