

 RENYLAB DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB022	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Sabouraud		
Pág: 1/1			
Revisão: 03	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Renata	Antônio	Renata Alves

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Sabouraud
Finalidade: Meio com nutrientes que favorece o crescimento de diversos fungos leveduriformes e filamentosos.

Data de fabricação: 02/08/2021	Lote: 21080999
Data de validade: 02/02/2022	Apresentação: Tubo de vidro 16x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 02/08/2021
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificações	Resultado
Inspeção visual	Amarelo claro	Amarelo claro
pH	5,6 ± 0,2	5,85
Volume envasado	5 mL	5 mL

Análise de Desempenho		
Cepas	Cepas	Resultado
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Crescimento bom a excelente	Crescimento excelente
<i>Aspergillus Níger</i> ATCC 16404	Crescimento bom a excelente	Crescimento excelente

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 72h de incubação	Não houve crescimento após 72h de incubação

Bibliografia
Procedimentos básicos em microbiologia clínica 3ªed. Pág. 411

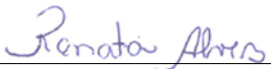
Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i>

Data: 05/08/2021.

Analista


Joelma de Souza Oliveira

Analista


Renata Alves dos Santos

Coordenador Técnico


Antônio dos Santos Galli