

|                                                                                                                                         |                                                                      |                      |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|  <b>REN Y LAB</b><br><small>DIAGNÓSTICOS IN VITRO</small> | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISE</b>                                        |                      |                       |
| <b>Código:</b> CAMB007                                                                                                                  | <b>Título:</b> Certificado de Análise de Produto Acabado – Ágar Cled |                      |                       |
| <b>Pág:</b> 1/1                                                                                                                         |                                                                      |                      |                       |
| <b>Revisão:</b> 02                                                                                                                      | <b>Emitido por:</b>                                                  | <b>Revisado por:</b> | <b>Conferido por:</b> |
| <b>Data:</b> 04/01/2021                                                                                                                 | Renata                                                               | Antônio              | Renata Alves          |

### Controle de Qualidade

|                                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Certificado de análise – Ágar Cled                                                                                  |  |
| Finalidade: Meio de cultura usado para isolamento e quantificação de microrganismos presentes em amostras de urina. |  |

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 29/09/2021 | Lote: 21091284                       |
| Data de validade: 29/01/2022   | Apresentação: Placa de petri 90x15mm |
| Quantidade amostrada: 10       | Data da amostragem: 29/09/2021       |
| Número MS:80002670075          | Armazenagem: 2º a 8ºC.               |

| Análise Físico química |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Teste realizado        | Especificação         | Resultado             |
| Inspeção visual        | Cor verde e homogêneo | Cor verde e homogêneo |
| pH a 25 C              | 7,3 ± 0,2             | 7,35                  |
| Volume                 | 23 mL                 | 23 mL                 |

| Análise de Desempenho                      |                                                                |                                                               |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Cepas                                      | Resultado esperado                                             | Resultado                                                     |
| <i>Staphylococcus aureus</i><br>ATCC 25923 | Crescimento de colônias amarelas                               | Houve crescimento de colônias amarelas                        |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC 25922      | Crescimento de colônias amarelas<br>Lactose positiva           | Houve crescimento de colônias amarelas. Lactose positiva      |
| <i>Proteus vulgaris</i><br>ATCC 8427       | Crescimento de colônias azuis translúcidas<br>Lactose Negativa | Crescimento de colônias azuis translúcidas. Lactose Negativa. |

| Análise da esterilidade |                                                                            |                                                        |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ensaio                  | Especificação                                                              | Resultado                                              |
| Esterilidade            | Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 48h de incubação em estufa. |

| Bibliografia                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV. |

| Parecer                                                       |
|---------------------------------------------------------------|
| <b>A amostra analisada atende às especificações descritas</b> |


Data: 01/10/2021.

Analista



Joelma Oliveira

Analista

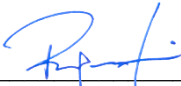

Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli