

Código: CAMB050	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Caldo TSB		
Pág: 1/1			
Revisão: 03	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 04/01/2021	Renata	Ramon	Antônio

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Caldo TSB

Finalidade: Meio de propósito geral utilizado para cultivo de uma grande variedade de microorganismos e teste de esterilidade

Data de fabricação: 22/01/2022	Lote: 22010127
Data de validade: 22/07/2022	Apresentação: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 24/01/2022
Numero MS: 80002670074	Armazenagem: 2 a 8° C

Análise Físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Cor amarelo claro, límpido.	Amarelo claro e límpido
pH a 25 C	7,30 ± 0,2	7,43
Volume	3 mL	3,0 mL

Análise de Desempenho

Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante.
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante.
<i>Candida albicans</i> ATCC 10231	Turvação do meio. Crescimento abundante	Turvação do meio. Crescimento abundante.

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24h de incubação em estufa microbiológica.

Bibliografia

Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - CLSI M22-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. Descrição dos Meios de Cultura Empregados nos Exames Microbiológicos-Mód IV.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas

Data: 25/01/2022.

Analista




Joelma Oliveira

Analista



Ramon Lopes

Coordenador Técnico

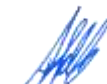

Antônio Galli