

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-----------------------|
| Código: CAMB080 | Título: Certificado de análise de produto acabado – Meio A3 Modificado | | |
| Pág: 1/1 | | | |
| Revisão: 00 | Emitido por: | Revisado por: | Conferido por: |
| Data: 25/05/2020 | Antônio | | Renata Alves |

**Controle de Qualidade
Meio A3 Modificado**

| | |
|--------------------------------|--|
| Data de fabricação: 01/12/2022 | Lote: 22122092 |
| Data de validade: 01/12/2023 | Apresentação: Tubo Criogênico capacidade 5mL |
| Quantidade amostrada: 12 | Data da amostragem: 02/12/2022 |
| Número MS: 80002670074 | Armazenagem: 2 a 30°C. |

| Análise Físico química | | |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Teste realizado | Especificação | Resultado |
| Inspeção visual | Meio laranja claro homogêneo | Meio laranja claro homogêneo |
| pH a 25 C | 6,4 ± 0,2 | 6,22 |

| Análise de Desempenho | | |
|---|---|---|
| Cepas | Resultado esperado | Resultado |
| <i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923 | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615 | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 10231 | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas |
| <i>Aspergillus niger</i> ATCC16404 | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas | Crescimento inibido em estufa microbiológica a 36°C em 72 horas |

| Análise da esterilidade | | |
|--------------------------------|--|--|
| Ensaio | Especificação | Resultado |
| Esterilidade | Não deve haver crescimento após 72 h de incubação em estufa microbiológica | Não houve crescimento após 72h de incubação em estufa microbiológica |

| Referências |
|--|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição. |

| Parecer |
|---|
| <i>A amostra analisada atende às especificações descritas.</i> |


Data: 05/12/2022.

Analista




Joelma Oliveira

Analista

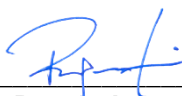

Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli