

Código: CAMB051

Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio Rugai Modificado

Pág.: 1/1

Revisão: 02

Emitido por:
Revisado por:
Conferido por:
Data: 04/01/2021

Renata

Antônio

Renata Alves

Certificado de Análise Meio Rugai Modificado

Controle de Qualidade

Data de fabricação: 07/03/2023	Lote: 23030404
Data de validade: 07/07/2023	Apresentação: Tubo de Vidro 12x120mm
Quantidade amostrada: 14	Data da amostragem: 08/03/2023
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Cepa	Fase Inferior		Fase Superior				Ápice		Rolha
	Lisina	Motilidade	Gás	Glicose	H ₂ S	Uréase	Sacarose	LTD	Indol
<i>Escherichia coli</i> ATCC: 25922	+	+	+	+	-	-	-	-	+
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC: 13883	+	-	++	+	-	-	-	-	-
<i>Citrobacter freundii</i> ATCC: 8090	-	+	+	+	±	-	+	-	-
<i>Morganella morganii</i> ATCC: 8019	-	-	-	-	-	+	-	+	+
<i>Salmonella typhimurium</i> ATCC: 14028	+	+	+	-	++	-	-	-	-

*Algumas provas apresentam se positivas em meios específicos, porém no meio rugai não são visualizadas por sobreposição por outros testes.

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não há crescimento após 24 h de incubação.	Não houve crescimento após 24 h de incubação.

00

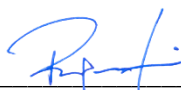
Bibliografia
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende todas as especificações descritas.

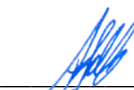
Data: 09/03/2023.

Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli