

**Código:** CAMB051

**Título:** Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio Rugai Modificado

**Pág.:** 1/1

**Revisão:** 02

**Emitido por:**
**Revisado por:**
**Conferido por:**
**Data:** 04/01/2021

Renata

Antônio

Renata Alves

## Certificado de Análise Meio Rugai Modificado

### Controle de Qualidade

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Data de fabricação: 12/01/2024 | Lote: 24010082                       |
| Data de validade: 12/05/2024   | Apresentação: Tubo de Vidro 12x120mm |
| Quantidade amostrada: 16       | Data da amostragem: 15/01/2024       |
| Número MS: 80002670075         | Armazenagem: 2° a 8°C                |

| Cepa   | Fase Inferior |            | Fase Superior |         |                  |        | Ápice    |     | Rolha |
|--|---------------|------------|---------------|---------|------------------|--------|----------|-----|-------|
|  | Lisina        | Motilidade | Gás           | Glicose | H <sub>2</sub> S | Uréase | Sacarose | LTD | Indol |
| <i>Escherichia coli</i><br>ATCC: 25922       | +             | +          | +             | +       | -                | -      | -        | -   | +     |
| <i>Klebsiella pneumoniae</i><br>ATCC: 13883  | +             | -          | ++            | +       | -                | -      | -        | -   | -     |
| <i>Citrobacter freundii</i><br>ATCC: 8090    | -             | +          | +             | +       | ±                | -      | +        | -   | -     |
| <i>Morganella morganii</i><br>ATCC: 8019     | -             | -          | -             | -       | -                | +      | -        | +   | +     |
| <i>Salmonella typhimurium</i><br>ATCC: 14028 | +             | +          | +             | -       | ++               | -      | -        | -   | -     |

\*Algumas provas apresentam se positivas em meios específicos, porém no meio rugai não são visualizadas por sobreposição por outros testes.

| Análise da esterilidade |  |   |
|-------------------------|--|---|
| Ensaio                  | Especificação                              | Resultado                                     |
| Esterilidade            | Não há crescimento após 24 h de incubação. | Não houve crescimento após 24 h de incubação. |

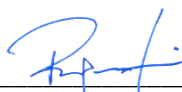
| Bibliografia   |
|--|
| Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição. |

| Parecer  |
|--|
| <b>A amostra analisada atende todas as especificações descritas.</b> |

**Data:** 16/01/2024

**Analista**


Joelma Oliveira

**Analista**


Ramon Lopes

**Coordenador Técnico**


Antônio Galli