		CERTIFICADO DE ANÁLISE	
Código: CAMB047	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Meio OF glicose sem óleo		
Pág: 1/1	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Revisão: 02	Renata	Antônio	Joelma
Data: 04/01/2021			

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Meio OF glicose sem óleo
Finalidade: Meio utilizado para a diferenciação de bacilos Gram-negativos quanto à capacidade do microrganismo em utilizar os carboidratos pela via oxidativa ou fermentativa.

Data de fabricação: 17/04/2024	Lote: 24040625
Data de validade: 17/10/2024	Apresentação: Tubo de vidro 13x100mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 18/04/2024
Número MS:80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Verde sem óleo na superfície	Amarelado, sem óleo na superfície
pH	6,9 ± 0,2	6,99

Análise de Desempenho		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 10145	Desenvolvimento de cor amarelo.	Desenvolvimento da cor amarela
<i>Klebsiella pneumoniae</i> ATCC 13883	Desenvolvimento de cor amarelo.	Desenvolvimento da cor amarela

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 24 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos- ANVISA módulo IV pág. 39

Parecer
<i>A amostra analisada atende às especificações descritas</i>


Data: 19/04/2024

Analista



Joelma Oliveira

Analista

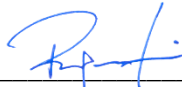

Ramon Lopes

Coordenador Técnico



Antônio Galli