

Código: CAMB070

Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Agar Cromogênico Strepto B

Pág.: 1/1

Revisão: 03
Emitido por:
Revisado por:
Conferido por:
Data: 02/08/2021

Antônio

Antônio

Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Agar Cromogênico Strepto B

 Finalidade: Meio Cromogênico utilizado para isolamento e diferenciação de *Streptococcus* do Grupo B

Data de fabricação: 05/09/2024	Lote: 24091429
Data de validade: 05/12/2024	Apresentação: Placa de Petri 90x15mm
Quantidade amostrada: 10	Data da amostragem: 05/09/2024
Número MS: 80002670075	Armazenagem: 2° a 8°C

Análise Físico química

Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Meio branco opalescente.	Meio branco opalescente.
pH a 25 C	7,3 ± 0,2	7,26

Análise de Desempenho

Microrganismo	Inoculo (UFC)	Crescimento	Recuperação	Cor das Colônias
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	50-100	Abundante	≥ 50%	Azul
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	≥ 10 ⁴	Crescimento Inibido	0%	-
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	≥ 10 ⁴	Crescimento Inibido	0%	-
<i>Neisseria meningitidis</i> ATCC 13090	≥ 10 ⁴	Crescimento Inibido	0%	-

Análise da esterilidade

Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia

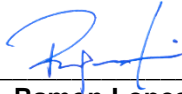
Procedimentos Básicos em Microbiologia Clínica, 3ª edição.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações acima descritas

Data: 09/09/2024

Analista


Joelma Oliveira

Analista


Ramon Lopes

Coordenador Técnico


Antônio Galli