

 R E N Y L A B DIAGNÓSTICOS IN VITRO	CERTIFICADO DE ANÁLISE		
Código: CAMB043	Título: Certificado de Análise de Produto Acabado – Thayer Martin		
Pág:1/1			
Revisão: 01	Emitido por:	Revisado por:	Conferido por:
Data: 11/2024	Antônio	Ramon	Ramon

Controle de Qualidade

Certificado de análise – Ágar Thayer Martin
Finalidade: Meio destinado ao cultivo e isolamento de bactérias do gênero <i>Neisseria</i> spp.

Data de fabricação: 09/06/2025	Lote: 25060768
Data de validade: 09/10/2025	Apresentação: Placa Petri lisa 90x15mm
Número MS: 80002670075	Data da amostragem: 10/06/2025
Armazenagem: 2° a 8° C.	

Análise Física química		
Teste realizado	Especificação	Resultado
Inspeção visual	Meio de cultura sólido cor marrom e homogêneo	Meio de cultura sólido cor marrom e homogêneo
pH a 25° C	7,20 ± 0,20	7,14

Análise de Performance		
Cepas	Resultado esperado	Resultado
<i>Neisseria gonorrhoeae</i> ATCC 43069	Crescimento bom, colônias pequenas com pigmento creme.	Crescimento bom, colônias pequenas com pigmento creme.
<i>Proteus mirabilis</i> ATCC 25933	Crescimento inibido.	Crescimento inibido.
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	Crescimento inibido.	Crescimento inibido.
<i>Candida albicans</i> ATCC 10321	Crescimento inibido.	Crescimento inibido.

Análise da esterilidade		
Ensaio	Especificação	Resultado
Esterilidade	Não deve haver crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica	Não houve crescimento após 48 h de incubação em estufa microbiológica

Bibliografia
Quality Control for commercially prepared microbiological Means of Culture; Approved Standard - CLSI M22-A3 . Clinical and Laboratory Standards Institute; 2004. Murray, P. R., E. J. Baron, J.H. Jorgensen, M. A. Pfaller, and R. H. Tenenbaum (ed.). 2023. Manual of clinical microbiology , 9th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. Difco Manual , 2° ed., 2009. Agência nacional de vigilância sanitária - ANVISA. Módulo 5: Tecnologia em Serviços de Saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames microbiológicos . 1ª edição – Brasil, 2010 OPLUSTIL, Carmem Paz; ZOCCOLI, Cassia Maria; TOBOUTI, Nina Reiko; SCHEFFER, Mara Cristina. Procedimentos básicos em microbiologia clínica . 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2007.

Parecer
A amostra analisada atende às especificações descritas


Data: 13/06/2025

Analista




Joelma Oliveira

Analista

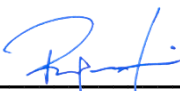

Ramon Lopes

Coordenador Técnico

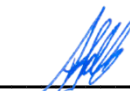

Antônio Galli